

mamivac®
BABYFEED

- Praktische Säuglingsfütterungshilfe
- Erleichterte Nahrungsaufnahme für Babys
- Verursacht keine Saugverwirrung
- Desinfizierbar durch Auskochen
- Wiederverwendbar
- Aus Polypropylen



VPE = 2 Stück
REF 282112
PZN 6607246

Klinikpackung
VPE = 10 Stück
REF 282113

mamivac®
BABYCUP

Sichere und kontrollierte Fütterung von kostbarem Kolostrum

- Ein einzigartiges, einfaches Hilfsmittel für die Verabreichung von aufgefangener Muttermilch
- Ermöglicht die Ernährung im natürlichen Tempo des Babys
- Kein Auslaufen oder Verschütten
- Auch bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte (Cheiloschisis)
- Passt auf alle Flaschen mit Standardgewinde
- Mit Adapter auch für Weithalsflaschen verwendbar
- CBM: Clean by manufacturing – muss vor der 1. Anwendung nicht aufbereitet werden



Babycup
REF 281610

PP-Flasche 50 ml
REF 28011135

Babycup-Set
mit Adapter und Weithalsflasche 140 ml
REF 281611



mamivac®
STILLHÜTCHEN

- Anwendung bei sensiblen und wunden Brustwarzen
- Ergonomisch geformt
- Optimaler Kontakt zwischen Mutter und Kind
- Desinfizierbar durch Auskochen
- Aus dünnem, transparentem, geschmacksneutralem Silikon
- Helfen auch bei Flach- und Hohlwarzen und bei Saugverwirrung des Säuglings

»kirschförmig«

Small (18 mm)
REF 281481
PZN 17373455

Medium (22 mm)
REF 281482
PZN 17373461

Large (28 mm)
REF 281515
PZN 19474344

»konisch«

Small (18 mm)
REF 281441
PZN 17373389

Medium (20 mm)
REF 281448
PZN 17373403

Large (28 mm)
REF 281442
PZN 17373426

mamivac®
BRUSTKOMPRESSE

- Einzel steril verpackte Wundauflage zur Behandlung von wunden Brustwarzen
- Optimaler Tragekomfort
- Aufnahme von Wundsekret
- Unterstützt die Wundheilung ohne zusätzliche Wirkstoffe
- Verklebungsarme Wundkomresse



1VPE = 10 Stk.
REF 281460
PZN 17312784

mamilan®
BRUSTCREME

- Zucker- und paraffinfrei
- Frei von Konservierungsstoffen
- Pflegt spröde Brustwarzen
- Muss vor dem Stillen nicht abgewaschen werden
- Enthält reines Lanolin
- Ist ideal für stillende Mütter mit sensibler und trockener Haut
- Kann Schwangerschaftsstreifen vorbeugen oder auch als Lippenbalsam verwendet werden



30 ml **REF 281488**
PZN 8763447

mamivac®
STILLEINLAGEN

- Die antimikrobielle Stilleinlage reduziert das Wachstum von Keimen wie Bakterien, Pilzen und Hefen
- Antimikrobieller, saugstarker Kern - Wirkung bleibt nach dem Waschen erhalten
- Nicht durchnässend, die Wäsche bleibt trocken
- Atmungsaktive Mikrofaser hält die Haut trocken
- Keine unangenehme Geruchsbildung
- Verschleißt, dicke Softnaht
- Anatomisch geformt, für besten Tragekomfort
- Waschbar bis 60°C, mehrfach verwendbar

6 Stück mit Waschbeutel
REF 281495
PZN 0005902




mamivac®
THERMO-PACK

Der **mamivac® Thermo-Pack** ist ein anatomisch geformtes Gelkissen, das entweder zum Wärmen oder zum Kühlen der Brust eingesetzt werden kann.

- Inkl. 3 Hygienehüllen
- Hilfe bei vielen Stillproblemen
- Zur optimalen Entspannung
- Universell einsetzbar

REF 281487
PZN 17374124

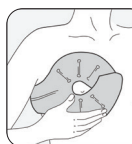

DIE BUNTE WELT DER UHREN

- Pffiffige Schwesternuhren finden Sie unter **www.kimetec.de**
- Made in Germany



Motherlove® steht für hochwirksame Extrakte und ganzheitliche Pflegeprodukte aus und mit Kräutern aus biologisch kontrolliertem Anbau.



www.motherlove.de

...und in Ihrer Apotheke erhältlich!

More Milk Plus®



Die sichere und bewährte Kräutermischung kann den Milchfluss anregen.

- Rein pflanzliches Flüssigkeitskonzentrat
- Darreichung: 60 Kapseln

Zutaten und Verzehrempfehlung finden Sie auf unserer Website **mamivac.com** oder **motherlove.de**



Regenerationspray

- Eine Wohltat nach der Geburt

PoWohl Creme

- Der Freund und Helfer bei Beschwerden im Analbereich

Morgenwohl

- Kleine Kapsel gegen die große Übelkeit

Kaiserschnittbalsam

- Für tägliche Massagen zur Rückbildung von Narbengewebe

Brustwarzencreme

- Rein pflanzlich für wunde Brustwarzen

Geburts- & Babymassageöl

- Unterstützend bei der Massage des Damms

Wundschutzcreme

- Für ein wonniges Windelgefühl

mamivac®
FÜR MÜTTER. FÜR BABYS.



STILLHILFEN



STILLEN – die schönste Zeit für Mutter und Baby

Muttermilch ist die beste Nahrung, die Sie Ihrem Baby geben können, denn sie enthält alles, was Ihr Baby zum gesunden Heranwachsen braucht. Es gibt jedoch Situationen, welche die Stillbeziehung zwischen Mutter und Kind beeinträchtigen können.

Wir von **Kimetec** sind als Hersteller von Medizinprodukten gemäß ISO 13485 zertifiziert und möchten Sie mit sicheren und effektiven Produkten unterstützen.

Wir wünschen Ihnen eine harmonische und glückliche Stillzeit.

WELCHE PUMPE FÜR WELCHEN ZWECK?

Wir haben die passende Pumpe für Sie. Wählen Sie, welche Pumpe für Sie und Ihre persönlichen Erwartungen am besten geeignet ist.

Medizinische Gründe:	Mastitis, Wunde Brustwarzen, Flach- oder Hohlwarzen, Milchstau, ungenügende Milchbildung, Baby im Krankenhaus
Klinik und Verleih:	Vollzeitbeschäftigung, Baby im Krankenhaus, Frühgeborene, häufiger Gebrauch
Privatgebrauch:	Berufstätigkeit, häufiger Gebrauch, unterwegs, Baby im Krankenhaus
Gelegentlicher Gebrauch:	Teilzeitbeschäftigung, bei Brustspannen, verschobene Stillmahlzeit, unterwegs

Handmilchpumpe **mamivac® EASY**

Elektrische Milchpumpe **mamivac® LACTIVE**

Elektrische Milchpumpe **mamivac® SENSITIVE-C**



TECHNOLOGIE

mamivac® 2-PHASEN-TECHNOLOGIE


Um das Abpumpen von Muttermilch so natürlich wie möglich zu gestalten, haben wir die **mamivac® 2-Phasen-Technologie** entwickelt. Die stufenlos regelbaren Phasen bestehen aus einer Stimulationsphase und einer Abpumpphase.

Die **Stimulationsphase** ahmt das zu Beginn schnelle, schwache Saugen des Babys nach, massiert die Brust sanft und regt den Milchfluss an. Die schonende und effektive **Abpumpphase** simuliert das langsamere, intensivere Saugen des Babys. Dabei wird effektiv die wertvolle Muttermilch gewonnen.



mamivac® DOUBLEPUMPING


Das gleichzeitige Abpumpen von Muttermilch an beiden Brüsten bringt eine **Zeitersparnis**. Die Abpumpzeit wird um ca. 50% reduziert. Damit bleibt der Mutter mehr Zeit – nicht nur bei Mehrlingsgeburten. Die patentierte Ventiltechnik gewährleistet Doublepumping ohne Saugverluste. Direkte Anschlüsse für zwei Sets sind an allen unseren elektrischen Milchpumpen vorhanden.

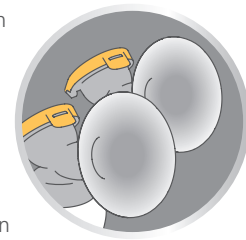

mamivac® SCHUTZMEMBRAN

Die patentierte Schutzmembran im Pumpset bietet **besten Schutz und Sicherheit für Mutter und Kind**.



Diese Membran riegelt die Muttermilchpumpe hermetisch ab. Muttermilch, Bakterien oder Keime können so weder die Schläuche, noch die Pumpe kontaminieren. So werden Kreuzkontaminationen zwischen Anwenderinnen und dem Gerät selbst vermieden.

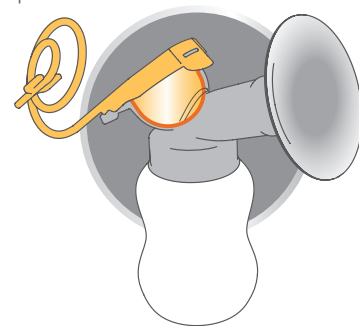

ELEKTRISCHE MILCHPUMPEN

mamivac® SENSITIVE-C Die bewährte Mietpumpe.

- Die **mamivac® 2-Phasen-Technologie** simuliert das Saugen des Babys
- Stufenlos einstellbare Vakuumpumpe, frei wählbares Pumpintervall
- Die Saugstärke entspricht den Geräten in der Klinik
- Kein Saugverlust bei Doublepumping
- Garantiert sanft, hygienisch und leise
- Kompaktes, wartungsfreies und langlebiges Gerät
- Frei von Keimen – patentierte Schutzmembran im Absaugset bietet besten Schutz und Sicherheit für Mutter und Kind

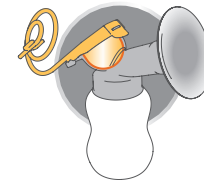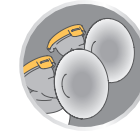

mamivac® LACTIVE Die kompakte 2-Phasen Milchpumpe für die aktive und berufstätige Mutter.

- Einfache Handhabung
- Pumpkomfort durch **2-Phasen-Technologie**
- Optische Stimulation durch das Foto Ihres Babys
- Zeitsparend durch optionales Doublepumping
- Beste Hygienestandard für Mutter und Kind



REF 287000
PZN 3721295
Made in Germany

ZUBEHÖR

mamivac® TRANSPORTKOFFER

Robuster Koffer zum sicheren Transport und zur Aufbewahrung der **mamivac® SENSITIVE-C**.

REF 283011
PZN 4253258



mamivac® KÜHLTASCHE

Die abgepumpte Milch kann in der Tasche kühl und sicher transportiert werden.

Das geräumige Fach bietet Platz für die **mamivac® EASY** oder **mamivac® LACTIVE** und weitere Flaschen.

REF 283024



mamivac® PUMPSET PREMIUM

- Bisphenol-A-freies Absaugset mit Weithalsflasche für maximalen Komfort
- Einfache und sichere Handhabung
- Schutzmembran garantiert beste Sicherheit für Mutter und Kind
- Passend für die Milchpumpen der Reihen **mamivac® SENSITIVE** und **LACTIVE** und für weitere Kolbenmilchpumpen
- PREMIUM L** enthält einen Silikon-Softeinsatz (Durchmesser 24 mm)

Die Brustglocken sind in verschiedenen Größen erhältlich:

S	Durchmesser 20 mm
L	Durchmesser 28 mm
XL	Durchmesser 36 mm

PUMPSET PREMIUM S REF 283129 PZN 11697375
PUMPSET PREMIUM L Einzelset REF 283120 PZN 6943004
PUMPSET PREMIUM L Doppelset REF 283123 PZN 6942996
PUMPSET PREMIUM XL REF 283133 PZN 11697406



HANDMILCHPUMPE

mamivac® EASY Die einfache Lösung für unterwegs.

- So saugstark wie eine elektrische Milchpumpe
- Die **mamivac® 2-Phasen-Technologie** simuliert das Saugen des Babys
- Einstellbare Saugstärke durch stufenloses Regulierventil
- Besteht aus wenigen Teilen – einfach zu reinigen
- Bequeme und sichere Einhandbedienung
- Hygienisch – die wertvolle Muttermilch fließt direkt in die Flasche
- Mit weichem Silikon-Softeinsatz



REF 281360
PZN 0972720
Made in Germany



mamivac® MUTTERMILCH-GEFRIERBEUTEL

Die **mamivac® Gefrierbeutel** zum hygienischen Einfrieren Ihrer kostbaren Muttermilch.

- Integrierter Verschluss
- Sicheres und sauberes Ausgießen
- Sicheres Abstellen durch praktischen Faltboden
- Mit Skalierung, beschriftbar

1VPE = 20 Stk.
REF 282100
PZN 1279777



Kimetec GmbH
Gerlinger Straße 36-38
71254 Ditzingen, Germany

Tel.: +49 (0) 71 56 / 1 76 02 - 200
Fax.: +49 (0) 71 56 / 1 76 02 - 500
E-mail: info@kimetec.de

mamivac®.com
Made in Germany