

mamivac[®]
france

CAR BÉBÉ AIME LE LAIT MATERNEL



Qui sommes nous ?

Depuis plus de 40 ans, Kimetec GMBH fabrique en Allemagne des dispositifs médicaux innovants, en particulier des tire-lait. En plus de ces appareils, la gamme de produits s'étend des accessoires tels que les sets de pompage et sacs de transport jusqu'aux produits de soins et de compléments pour les femmes qui allaitent.

Nous sommes un partenaire conscient de ses responsabilités dans l'application du **code OMS**. Toutes nos activités sont centrées sur les questions d'allaitement. Nos produits fournissent les solutions aux problèmes d'allaitement en le considérant dans sa globalité et sa durabilité.

Nos produits sont vendus sous les noms de marque suivants :

Où trouver les produits Mamivac ?

Rendez-vous sur notre site internet www.mamivac.com/fr



Carte mise à jour mensuellement.

<https://www.map-mamivac.com>

mamivac[®]

mamivac[®]
france

mamilan[®]

Nous sommes certifiés selon la norme
EN ISO 13485



Membre de
German Health Alliance



SOMMAIRE

Tire-lait

SENSITIVE-CFH	6
SENSITIVE-C	8
KIT DE POMPAGE	10
LACTIVE	12
TIRE-LAIT MANUEL EASY	13

Accessoires d'allaitement

PROTÈGE-MAMELONS	14
PROTECTIONS D'ALLAITEMENT	15
COQUILLES DE RECUEIL / BABYFEED	16
COUSSINET THERMOPACK	17

Transport

SACHETS DE CONGÉLATION	18
MALLETES ET SACS DE TRANSPORT	19

Tire-lait

Accessoires
d'allaitement

Transport



APERÇU

Quel tire-lait convient à votre besoin ?

Tire-lait électrique ou manuel ? Notre gamme de produits comprend trois types de tire-lait électriques et un tire-lait manuel. Ces différents modèles répondent parfaitement aux cas particuliers.

Les tire-lait électriques de la gamme **mamivac**[®] vous permettent de tirer le lait maternel de manière rapide et en douceur.

L'aperçu vous aidera à trouver le modèle adapté à votre besoin et celui de la maman.

Les tire-lait	Location	Hospitalier	Achat	
	Tire-lait électrique	Tire-lait électrique	Tire-lait électrique	Tire-lait manuel
	Sensitive-C	Sensitive-CFH	Lactive	EASY
				
Usage occasionnel : Occupation professionnelle à temps partiel, seins tendus, report de l'heure d'allaitement, hors de la maison	✓		✓	✓
Usage fréquent : Occupation professionnelle à plein temps, bébé à l'hôpital	✓	✓	✓	
Raisons médicales : Mastite, mamelons irrités, mamelons plats ou ombiliqués, engorgement des seins, insuffisance de lait, bébé à l'hôpital	✓	✓	✓	✓

TECHNOLOGIE 2 PHASES

Pour que le tirage du lait maternel se fasse le plus naturellement possible, nous avons développé la technologie 2 phases. Les phases réglables en continu comprennent une phase de stimulation et une phase de tirage. La phase de stimulation imite la succion du bébé, rapide et faible au début, qui masse les seins en douceur et amorce la montée de lait (lactation). La phase d'expression simule la succion plus lente et plus prononcée du bébé, tout en ménageant le sein maternel. Le précieux lait maternel est recueilli en toute efficacité.




Tire-lait

DOUBLE TIRAGE

Tirer le lait des deux seins simultanément fait gagner du temps. La durée de tirage est réduite de 50%, la mère dispose alors de plus de temps, entre autres dans le cas d'enfants multiples.

La technologie de la soupape brevetée garantit un double tirage sans perte d'aspiration. Chaque tire-lait dispose déjà des branchements permettant de brancher deux sets de pompage.

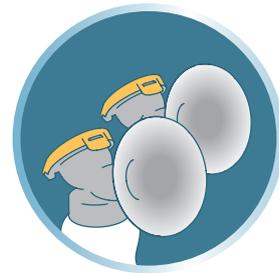

Accessoires
d'allaitement

MEMBRANE DE PROTECTION

Sécurité et hygiène parfaites pour la maman et le bébé.

La membrane de protection brevetée intégrée dans le set de pompage est une barrière très efficace contre les germes, donc une réelle sécurité pour la maman et l'enfant. Cette membrane obture hermétiquement le tire-lait [système clos ]. Ni le lait maternel, ni les bactéries, ni les germes ne peuvent entrer en contact avec les tuyaux flexibles ou la pompe.


Les contaminations entre la maman et l'appareil sont évitées.

Les pièces du set de pompage en contact avec le lait maternel [système ouvert ] se nettoient facilement (ébullition, lave-vaisselle ou stérilisateur). La membrane de protection brevetée intégrée dans le set de pompage garantit l'hygiène parfaite du tire-lait.



Transport

-  Membrane de protection
-  Système clos
-  Système ouvert

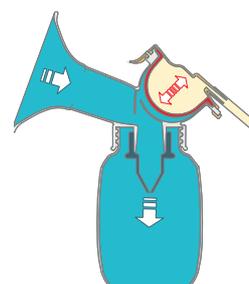

SENSITIVE-CFH



Le tire-lait 2 phases idéal en milieu hospitalier.

Le tire-lait **SENSITIVE-CFH** répond aux sollicitations quotidiennes d'emploi en milieu hospitalier. Avec sa membrane de protection brevetée, ce tire-lait respecte les normes exigeantes d'hygiène du milieu médical. Grâce à la simplicité de maniement et d'utilisation, il s'adapte parfaitement aux besoins de chaque maman.

REF 286000

Le tire-lait **SENSITIVE-CFH** est également disponible en modèle mobile sur pied roulant.



Pied roulant
REF 283012



Mobilité et flexibilité en milieu hospitalier

- Mobile grâce au pied roulant pratique pour l'emploi en milieu hospitalier,
- Alimentation électrique par courant continu ou courant alternatif,
- Double support de flacons intégré,
- Rythme personnalisé, réglage en continu,
- Phase de stimulation et phase d'expression,
- Emploi facile,
- Fonctionnement par bloc d'alimentation 100-240 V/AC ou sur branchement 12 V/DC.



Pour assurer, en option, un fonctionnement continu sur batterie rechargeable, nous recommandons de commander deux batteries et un chargeur.

Valve protection kit à usage unique

- Permet d'adapter aux kits à usage unique,
- Facile à utiliser,
- Membrane de protection intégrée,
- Apporte une protection supplémentaire,
- Utilisation simultanée de 2 valves pour un pompage double possible.



REF 230272



DONNÉES TECHNIQUES	
SENSITIVE-CFH Tire-lait électrique avec double support de flacons	
Vide (force de succion)	Réglable en continu de -5 jusqu'à -33 kPa (±15%)
Intervalle (vitesse)	<ul style="list-style-type: none"> • Phase de stimulation avec 100 cycles/min. • Phase d'expression réglable en continu de 20 jusqu'à 48 cycles/min.
Alimentation en courant électrique	100-240 V/AC, 50/60 Hz, max. 0,62 A/AC 12 V/DC, max. 1,25 A/DC
Dimensions [hxlxL]	24 cm x 21 cm x 22 cm
Poids	1,3 kg
Garantie commerciale	3 ans
OPTIONS	
PIED A ROULETTES	REF 283012
BATTERIE RECHARGEABLE 12V	REF 283013
CHARGEUR pour batterie 12V	REF 283016
VALVE PROTECTION POUR KIT A USAGE UNIQUE	REF 230272

SENSITIVE-C



Le tire-lait idéal à la location.

- La **technologie 2 phases** reproduit le mode de succion du bébé,
- Réglage en continu de la force de succion (force du vide), réglage indépendant de la vitesse de pompage,
- La force de succion correspond à celle des appareils destinés à l'usage en milieu hospitalier,
- Double tirage sans perte d'aspiration,
- Douceur, hygiène et silence garantis,
- Solide et durable, sans entretien,
- La membrane de protection brevetée intégrée dans le set de pompage est une barrière très efficace contre les germes, donc une réelle sécurité pour la maman et l'enfant.

REF 284000



DONNÉES TECHNIQUES	
SENSITIVE-C Tire-lait électrique de location	
Vide (force de suction)	Réglable en continu de -5 jusqu'à -33 kPa ($\pm 15\%$)
Intervalle (vitesse)	<ul style="list-style-type: none"> • Phase de stimulation avec 100 cycles/min. • Phase de tirage réglable en continu de 20 jusqu'à 48 cycles/min.
Alimentation en courant électrique	100-240 V/AC, 50/60 Hz, max. 0,62 A/AC 12 V/DC, max. 1,25 A/DC
Dimensions [hxlxL]	19 cm x 11,2 cm x 14,5 cm
Poids	0,8 kg
Garantie commerciale	3 ans
N° de dispositif médical	01.35.01.1008
OPTIONS	
MANOMÈTRE DE CONTRÔLE	REF 289997
SAC À DOS DE TRANSPORT	REF 126190

Tire-lait

Accessoires
d'allaitement

Membrane de protection
montée directement dans le
kit de pompage



MANOMÈTRE DE CONTRÔLE

- Mesurez la pression du tire-lait grâce au manomètre de contrôle

REF 289997



Transport

KIT DE POMPAGE



CE 0124

KIT DE POMPAGE PREMIUM LIGHT

Kit de pompage sans bisphénol A avec flacon à col large et embout souple assurant un confort parfait.

- Flacon PP (140 ml) à col large,
- La membrane de protection assure sécurité et hygiène parfaites pour la maman et le bébé,
- Composé de peu d'éléments, facile à nettoyer,
- Emploi facile et maniement sûr,
- Approprié pour les tire-lait des séries **SENSITIVE** et **LACTIVE**,
- En utilisant un embout souple, la taille de l'embout se réduit à «**M**» (24 mm).

Kit simple S
Kit double S



REF 201064
REF 283130K02

Kit simple L
Kit double L

REF 230242
REF 283123K02

Kit simple XL

REF 230260

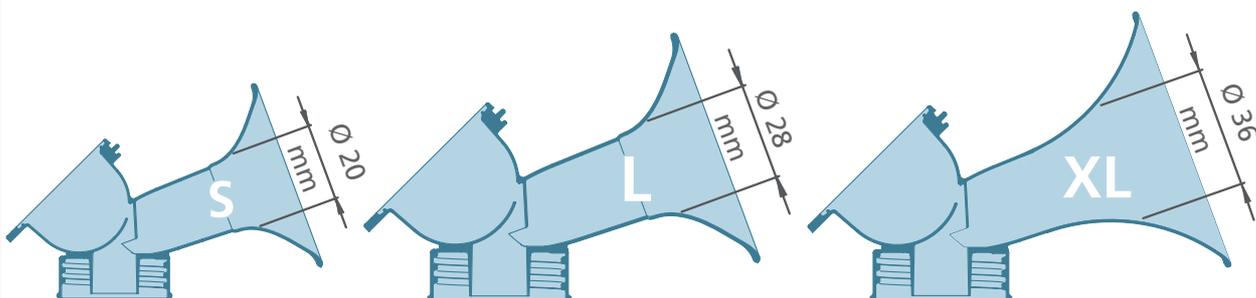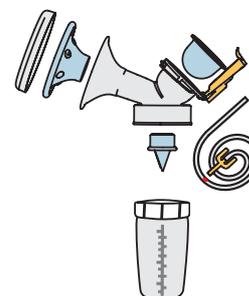



CLOCHES MAMMAIRES SEULES

Convient pour le KIT DE POMPAGE PREMIUM LIGHT.

- La taille **S** (20 mm) est conçue pour les mamelons de petites tailles,
- La taille **XL** (36 mm) est conçue pour les mamelons de grandes tailles,
- Plus de confort grâce aux dimensions adaptées,
- Le choix de la bonne taille de cloche facilite le tirage avec le tire-lait.

CE 0124



Taille **S** REF 201065

Taille **XL** REF 128101

EMBOUIT CONFORT



- S'adapte sur la tétérelle L,
- En silicone.

REF 281215

SEIN DE DÉMONSTRATION



- Destiné à des fins de démonstration,
- Diamètre : 75 mm, Poids : 250 g

REF 281250

MAMILLOMÈTRE



- Trouver la bonne taille de tétérelles ou protège-mamelons

LACTIVE



Le tire-lait confortable.

- Emploi facile,
- Confort de tirage grâce à la technologie 2 phases,
- Stimulation visuelle par la photo de bébé favorisant la montée du lait,
- Gain de temps grâce au double tirage,
- Parfaites sécurité et hygiène pour la maman et le bébé,
- Kit simple «L» inclus.

REF 287000

Stimulation grâce à l'insertion visuelle

Membrane de protection montée directement dans le kit de pompage

Réglage du vide en continu



CE 0124



Stimulation visuelle :

Collez la photo de bébé avec le film collant préparé sur le tire-lait. Ceci stimule la montée de lait.



Stimulation physique :

Pendant la **phase 1 de stimulation**, le massage des seins en douceur stimule la lactation.

La **phase 2 d'expression** reproduit la succion plus lente et intense du bébé. Le précieux lait maternel est recueilli en toute efficacité.

DONNÉES TECHNIQUES

LACTIVE Tire-lait électrique pour l'usage à domicile

Vide (force de succion)	Réglable en continu de -5 jusqu'à -33 kPa (±15%)
Intervalle (vitesse)	<ul style="list-style-type: none"> • Phase de stimulation avec 60 cycles/min. • Phase de tirage avec 30 cycles/min.
Alimentation en courant électrique	100-240 V/AC, 50/60 Hz, max. 0,62 A/AC 12 V/DC, max. 1,25 A/DC
Dimensions [hxlxL]	11,5 cm x 12,5 cm x 19,5 cm
Poids	0,6 kg
Garantie commerciale	1 an (300h d'opération)

OPTION

SOFT-BAG	REF 283014
----------	------------



EASY TIRE-LAIT MANUEL



Aussi efficace qu'un tire-lait électrique !

Ce tire-lait manuel permet de tirer le lait manuellement dans les meilleures conditions d'hygiène et de propreté. La solution simple à utiliser chez soi ou à l'extérieur.

- La **technologie 2 phases** reproduit le mode de succion du bébé,
- Succion réglable en continu par soupape de régulation,
- Composé de peu d'éléments – facile à nettoyer,
- Manipulation d'une seule main offrant confort et sécurité,
- Embout souple à action massante,
- Hygiène garantie : le lait maternel s'écoule directement dans le flacon.

REF 281360



Tire-lait

Accessoires
d'allaitement

Transport

PROTÈGE-MAMELONS



CE 0124



- Application en cas de mamelons sensibles et irrités,
- Conception ergonomique,
- Contact optimal entre la mère et le bébé,
- Peut être stérilisé (134°C) et bouilli,
- En silicone mince, transparent et sans odeur.



2 pièces non stériles dans une boîte de rangement.

1 pièce stérile dans un emballage. Vendu par 50, disponible sur demande.

Format hospitalier non stérile par 50 disponible sur demande.

**Forme cerise
Non stérile**



Petit = 18 mm
REF 281481



Moyen = 22 mm
REF 281482


**Forme conique
Non stérile**



Petit = 18 mm
REF 281441



Moyen = 20 mm
REF 281448

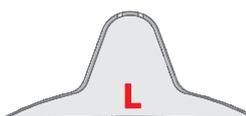

Grand = 28 mm
REF 281442


**Forme conique
Stérile**



Petit = 18 mm
REF 281600



Moyen = 20 mm
REF 281603

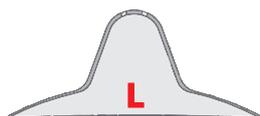

Grand = 28 mm
REF 281606

BOÎTE DE PRÉSENTATION POUR LES PROTÈGE-MAMELONS



- Présentation de toute la gamme

REF 230248

PROTECTIONS D'ALLAITEMENT

La protection d'allaitement antimicrobienne freine le développement de bactéries, de champignons, de levures et de germes.

Le risque de mastite se réduit.

- Couche intermédiaire très absorbante, à action antimicrobienne,
- Imperméables aux liquides, les vêtements restent au sec,
- Lavables jusqu'à 60°C, à usage multiple,
- L'effet antimicrobien se poursuit après le lavage,
- Les microfibres antimicrobiennes maintiennent la peau au sec,
- Matière particulièrement souple, sûre et agréable pour la peau,
- Pas d'odeurs désagréables,
- Couture soudée, étanche et souple,
- Forme anatomique assurant un confort parfait.

1 boîte de 6 pièces (sac de lavage inclus)

REF 281495



Antimicrobienne
(ions d'argent)



Très absorbante et
imperméable aux
liquides



Microfibres
thermoactives

Tire-lait

Accessoires
d'allaitement

Transport

COQUILLES DE RECUEIL DU LAIT



- Le lait échappé est recueilli de manière sûre et les vêtements sont protégés,
- Avec un bec verseur pour transvaser proprement le lait,
- Conception anatomique,
- Matière : polypropylène.

La paire REF 281496

BABYFEED

- Gobelet spécial nourrissons pratique pour les bébés qui ont des difficultés de succion,
- Permet d'alimenter les bébés qui ont le palais, la lèvre ou la mâchoire fendus,
- Convient parfaitement pour donner des médicaments aux bébés,
- Forme de succion familière au bébé,
- Les muscles de la mâchoire sont entraînés et la coordination de la déglutition avec la respiration est favorisée,
- Peut être stérilisé et bouilli,
- En polypropylène,
- Réutilisable.

Sachet 2 pièces

REF 282112

Emballage hospitalier 10 pièces

REF 282113



COUSSINET THERMOPACK



Le coussinet thermique est une compresse mammaire adaptée à l'anatomie de la poitrine. Il est utilisé pour réchauffer ou rafraîchir les seins.

- 3 enveloppes hygiéniques incluses,
- Aide à résoudre de nombreux problèmes liés à l'allaitement,
- Assure une détente maximale,
- Soulage agréablement l'inflammation des seins.

Coussinet thermique REF 281487

Protections de coussinet en non-tissé x 5 REF 230226

Protections de coussinet en non-tissé x 25 REF 230257

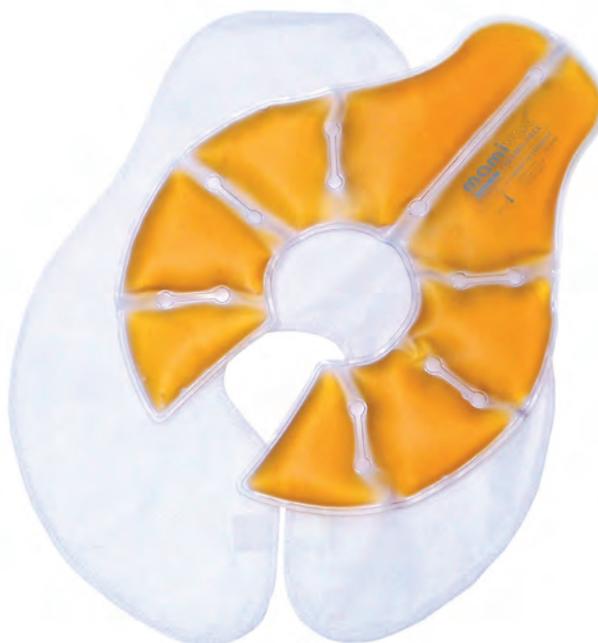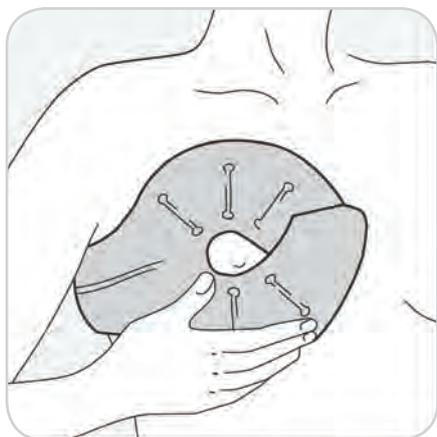

Matière

Le gel thermique de haute qualité résiste à des températures entre -18°C et 80°C et n'est pas toxique.

Refroidir

Refroidir dans le réfrigérateur pendant 1 heure environ (-18°C au max.).

Réchauffer

Dans un bain-marie (80°C env.) pendant 5 à 10 minutes.

SACHETS DE CONGÉLATION

Pour congeler le lait maternel dans des conditions d'hygiène optimales. Il se conserve 4 heures à température ambiante, jusqu'à 48 heures au réfrigérateur et jusqu'à 4 mois au congélateur sans prendre de place. La fermeture intégrée permet de fermer le sachet hermétiquement et de déverser le lait plus tard.

- Fermeture intégrée,
- Sachet à fond plié facilitant la pose sûre,
- Gradué, possibilité de marquer le sachet,
- Contenance : 150 ml.

1 boîte de 20 sachets REF 282100



Lait maternel	Température ambiante <26°	Réfrigérateur +4°	Congélateur -18°
Fraîchement exprimé	4 heures	48 heures (dans l'endroit le plus frais du réfrigérateur)	4 mois
Décongelé au frigo mais non chauffé	Maxi 1 heure	24 heures	Ne pas recongeler
Décongelé et réchauffé	Maxi 1 heure	Maxi 1 heure	Ne pas recongeler
Reste de biberon	À consommer dans la demi-heure	À jeter	À jeter

Selon les recommandations du ministère de la santé 2013

MALLETES ET SACS DE TRANSPORT

MALLETTE DE TRANSPORT

Mallette solide pour une meilleure sécurité lors du transport du tire-lait de location **SENSITIVE-C.**

REF 283011



SAC À DOS DE TRANSPORT

Sac à dos avec poche isotherme zippée pour tire-lait **SENSITIVE-C.**

REF 126190



SOFT-BAG

Sac à bandoulière en nylon résistant et lavable avec compartiments fonctionnels et poche extérieure. Approprié pour les tire-lait **LACTIVE** et **SENSITIVE-C.**

REF 283014



Tire-lait

Accessoires
d'allaitement

Transport

MAMIVAC FRANCE - France Allaitement

12 Porte du Grand Lyon - 01700 Neyron

Tél : 09 72 38 54 50

Fax : 09 72 13 14 19

E-Mail : info@mamivac.fr



[/mamivacfrance](#)



[/mamivacfrance](#)